

## ➤ Cama Manual Dos Manivelas OA7002S





### DESCRIPCIÓN

La cama manual de dos manivelas es una solución práctica y versátil diseñada para brindar comodidad y seguridad tanto a pacientes como a cuidadores en entornos médicos y de cuidado en el hogar. Con un diseño robusto fabricado en acero resistente, esta cama ofrece una superficie de descanso confortable y ajustable.



### DATOS TÉCNICOS

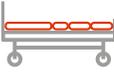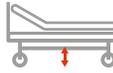 <p>LONGITUD TOTAL 105 cm</p>	 <p>ANCHO TOTAL 90 cm</p>	 <p>ALTURA TOTAL 84 cm</p>	 <p>PESO MÁXIMO DEL USUARIO 130 kg</p>
 <p>DIMENSIONES DEL SOMIER 60 / 57 / 56 cm</p>	 <p>ALTURA BASE-SUELO 42 cm</p>	 <p>ÁNGULO DEL RESPALDO 75°</p>	 <p>ÁNGULO DEL MUSLO 35°</p>
 <p>PESO TOTAL 41 kg</p>	 <p>COLOR CHASIS Beige</p>		



## CARACTERÍSTICAS

Dos manivelas para ajustar la altura de la cama.  
 Sistema de bloqueo seguro en las ruedas para mantener la posición deseada.  
 Dos perforaciones para colocar el portasuero.  
 La estructura de la cama ha sido diseñada para ser transportada y almacenada fácilmente, así como para montarla y desmontarla con la misma facilidad.



## MATERIALES

Estructura y desmontables de acero (esmaltado), color beige.  
 Cabecera y piecera de acero (esmaltado), color beige.  
 Barandales de acero (esmaltado), color beige.  
 Tornillos y tuercas de acero (galvanizado).  
 Ruedas giratorias 360° de silicón de 5".



## FUNCIONALIDAD

	SI	NO
BARANDALES ABATIBLES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
BARANDALES DESMONTABLES	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CONTROL ELÉCTRICO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
MANIVELA PARA PIES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
MANIVELA PARA CABECERA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4 LLANTAS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>




## ACCESORIOS

	SI	NO
PORTA SUERO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
TARJETERO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
MESA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



## MANTENIMIENTO

1. Lea el manual del usuario antes de usar este producto y siga todas las instrucciones de seguridad y uso.
2. Inspeccione visualmente la cama. Compruebe si las piezas presentan signos de desgaste o deterioro externo.
3. Limpie y desinfecte el producto cuando haya estado en contacto con fluidos corporales y antes de usarlo con un nuevo usuario.
4. Se recomienda usar un desinfectante para superficies a base de alcohol (con 70-90 % de alcohol).
5. Revise los puntos de lubricación de la cama y engráselos del modo adecuado, al menos cada dos años con lubricante líquido WD-40.

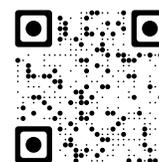

Consulta nuestro manual  
 para Cama Manual Dos Manivelas



## GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



## EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	197 x 95 x 12 cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	44 kg

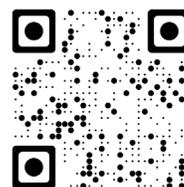

Visita nuestra página web

### ¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.