

➤ Scooter Eléctrico 4 Ruedas Rojo OA6160B



DESCRIPCIÓN

El scooter de 4 ruedas combina estabilidad y comodidad para proporcionar una solución de movilidad excepcional. Diseñado con un motor potente y silencioso, su estructura robusta y ligera es ideal tanto para interiores como exteriores, proporcionando libertad e independencia a sus usuarios. El asiento acolchado y ajustable asegura el máximo confort y facilidad de uso.




DATOS TÉCNICOS



LONGITUD TOTAL
110 cm



ANCHO TOTAL
49 cm

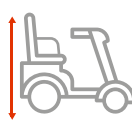

ALTURA TOTAL
82-89 cm



PESO MÁXIMO DEL USUARIO
100 kg



PROFUNDIDAD ASIENTO
46 cm



ÁNGULO DEL ASIENTO
0°



ALTURA DEL ASIENTO
34-53 cm



ÁNGULO DEL RESPALDO
90°




ALTURA DEL RESPALDO
48 cm



MEDIDAS CANASTA
24 x 22 x 32.5 cm



PESO TOTAL
44 kg

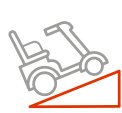

PENDIENTE MÁXIMA
8°



RADIO DE GIRO
2200 mm



CAPACIDAD PARA SUPERAR OBSTÁCULOS
40 mm (12Ah)
45mm (18Ah)



COLOR CHASIS
Negro / Rojo



COLOR (OTRO)
Tapizado:
Vinipiel / negro



CARACTERÍSTICAS

- Modo eléctrico.
- Diseño ergonómico para mayor comodidad.
- Asiento giratorio y altura ajustable 3 niveles.
- Luces delanteras LED para una clara visión.
- Dos llaves de encendido.
- Fácil de maniobrar en espacios reducidos y diferentes terrenos, pendientes y baches.
- Frenos electromagnéticos.
- Cargador de batería.
- Manubrio abatible con canasta porta objetos desmontable.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Potencia de motor: 24V/180W.
- Duración de la batería entre 6 y 8 horas en uso continuo.
- Autonomía de 20 Km con carga completa.
- Velocidad por hora: 0-8 Km/h.
- Voltaje de entrada del cargador: 12V*2 o 20AH.
- Cargador de batería (uso por primera vez cargar 12 horas).



Funciones del manubrio:

- Botón de encendido
- Reduce la velocidad
- Aumenta la velocidad
- Claxon
- Palanca de dirección delante/reversa.



Pantalla TFT con indicador de carga vacía / llena.



Botón de encendido/apagado luz LED delantera.



MATERIALES

Estructura de plástico resistente y duradera.
Asiento y respaldo: Espuma de poliuretano y tapizado de vinipiel.
Ruedas traseras y delanteras de PU 9" (23 cm).
Llantas antivuelco de PVC.



FUNCIONALIDAD

	SI	NO
PLEGABLE		●
TIPO DE PLEGADO	-	
REPOSAPIÉS ABATIBLES	○	●
REPOSABRAZOS ABATIBLES	○	●
FRENOS	●	○



ACCESORIOS

	SI	NO
CINTURÓN DE SEGURIDAD	○	●
BOLSA DE ALMACENAMIENTO	○	●
PORTAVASOS	●	○
BATERÍA	●	○
CONTROL JOYSTICK	○	●



MANTENIMIENTO

1. Se recomienda limpiar con regularidad las ruedas y mecanismos.
2. Verificar que los frenos funcionen correctamente
3. Revisar y apretar tornillos y conexiones periódicamente.
4. No conduzca el scooter en superficies mojadas o resbaladizas.
5. No realizar maniobras bruscas o giros cerrados.



GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	56 x 100 x 52 cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	50 kg

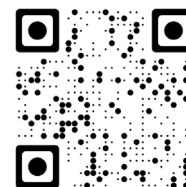

Visita nuestra página web

¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.