

» Silla de Ruedas Eléctrica OA71026



DESCRIPCIÓN

La silla de Ruedas Eléctrica ha sido diseñada para proporcionar una experiencia de movilidad óptima, equipada con un motor de alto rendimiento proporciona una conducción suave y silenciosa, ideal para uso tanto en interiores como en exteriores. Con una batería recargable de alta capacidad, disfruta de un mayor tiempo de uso entre cargas, el joystick de fácil manejo permite un control preciso y sencillo.




DATOS TÉCNICOS



LONGITUD TOTAL
108 cm



ANCHO TOTAL
58 cm

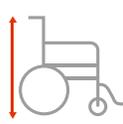

ALTURA TOTAL
92 cm



PESO MÁXIMO DEL USUARIO
100 kg



PROFUNDIDAD ASIENTO
44 cm




ÁNGULO DEL ASIENTO
0°



ALTURA DEL ASIENTO
52 cm



ÁNGULO DEL RESPALDO
100°

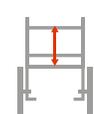

ALTURA DEL RESPALDO
43 cm



ANCHO PLEGADA
38 cm



PESO TOTAL
43 kg



PENDIENTE MÁXIMA
10°



COLOR CHASIS
Gris



COLOR (OTRO)
Tapizado:
Lona y tela mesh color negro.



CARACTERÍSTICAS

Modo manual y modo eléctrico.
Diseño ergonómico para mayor comodidad con asiento acolchado.
Dos palancas de seguro para llantas traseras
Estructura resistente y duradera.

Motor de alto rendimiento y frenos electromagnéticos que proporcionan una parada segura.
 Soporte para piernas de tela acojinada.
 Llave para ajuste de frenos.
 Ruedas traseras de alta tracción y delanteras anti-pinchazos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería recargable de alta capacidad.
 Potencia: 24V/12AH.
 Duración de la batería de 5-6 horas.
 Cargador Ac- 110 - 230 V 50/60HZ Salida 29.6V 1.8A± 0.1A 19*6
 Recorre 30 km por carga.
 Descansapiés abatibles.
 Descansabrazos abatible.
 Equipo de herramienta.



Funciones de JOYSTICK:
 Botón de encendido
 Disminuir velocidad
 Aumentar velocidad
 Bocina

MATERIALES

Estructura: Chasis y tubos de acero.
 Asiento y respaldo: Lona y tela mesh.
 Ruedas traseras neumáticas de 16" (41 cm).
 Ruedas delanteras de PVC de 9" (24 cm).
 Mecanismo de plegado.

FUNCIONALIDAD

| | SI | NO |
|------------------------|---------|----|
| PLEGABLE | ● | ○ |
| TIPO DE PLEGADO | Cruceta | |
| REPOSAPIÉS ABATIBLES | ● | ○ |
| REPOSABRAZOS ABATIBLES | ● | ○ |
| FRENOS | ● | ○ |

ACCESORIOS

| | SI | NO |
|-------------------------|----|----|
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | ● | ○ |
| BOLSA DE ALMACENAMIENTO | ● | ○ |
| PORTAVASOS | ○ | ● |
| BATERÍA | ● | ○ |
| CONTROL JOYSTICK | ● | ○ |

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda limpiar con regularidad las ruedas y mecanismos.
2. Verificar que los frenos funcionen correctamente
3. Revisar y apretar tornillos y conexiones periódicamente.
4. No conduzca la silla en superficies mojadas o resbaladizas.
5. No realizar maniobras bruscas o giros cerrados.



GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



EMPAQUE

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD | Caja |
| CANTIDAD | 1 pieza |
| DIMENSIONES DE LA CAJA | 73.5 x 41 x 86 cm (largo x ancho x alto). |
| PESO DE LA CAJA | 47.5 kg |

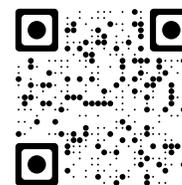

Video Informativo de la Silla de Ruedas Eléctrica

¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.